




## MEDPUR-STANDARDVERPACKUNGEN FÜR SCHARFKANTIGE UND KRATZEMPFINDLICHE PRODUKTE

**MEDPUR-Pack**  
**MEDPUR-Pouch**  
**MEDPUR-Envelope**  
**MEDPUR-Tip-Protector**  
**MEDPUR-Sleeve**

  
**MEDIPACK AG**  
M E D I Z I N A L V E R P A C K U N G E N

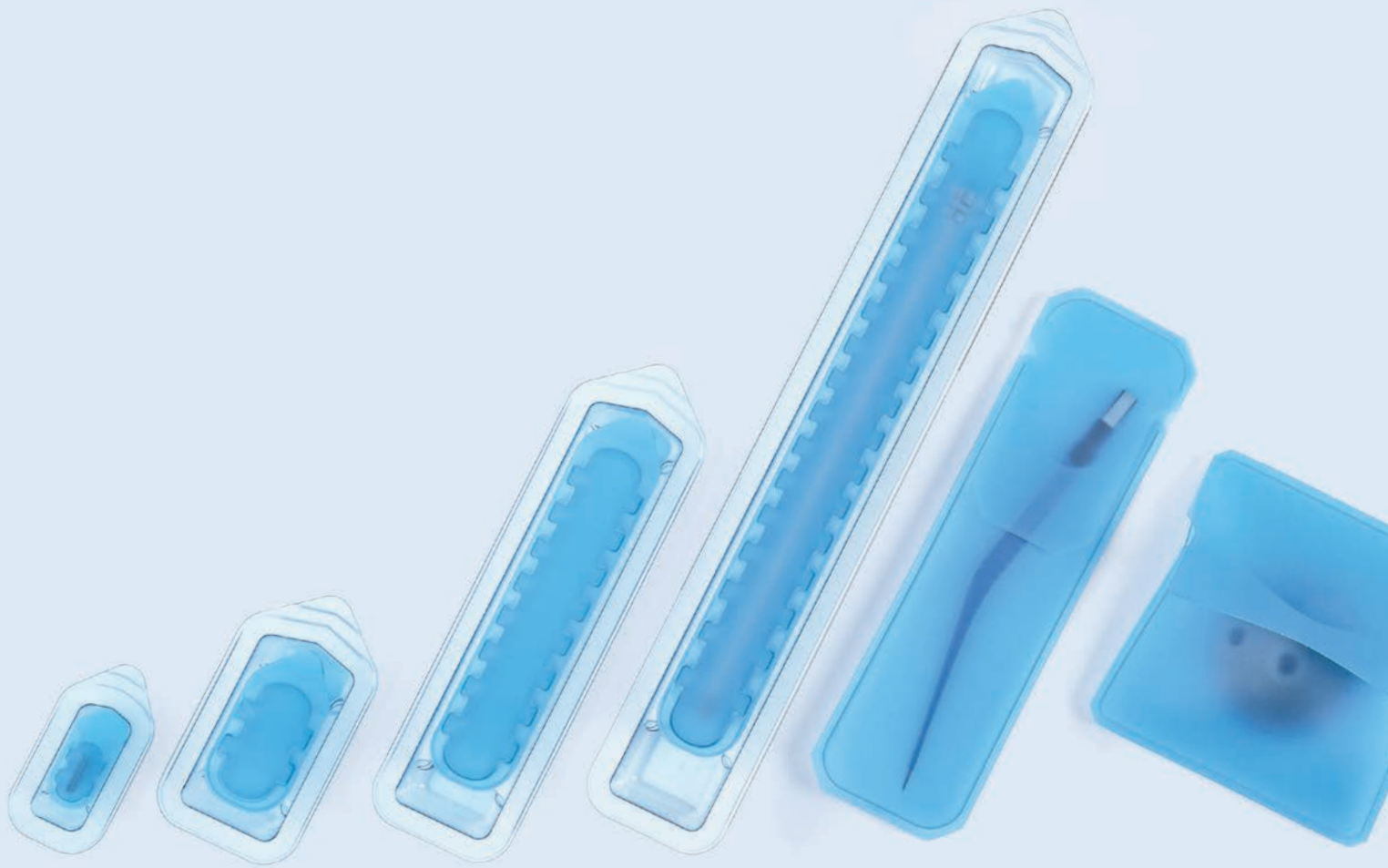

## MEDPUR-PRODUKTFAMILIE

### **MEDPUR-Pack**

Der MEDPUR-Pack besteht aus einem vorgefertigten Tiefziehteil und einem verschweissten Deckel aus MEDPUR, welche den Rundumschutz garantieren. Eingebaute Rippen dämpfen auch schwerste Produkte. Dank dem vorperforierten Deckel lassen sich die Produkte berührungsfrei entnehmen.






Verpackungen aus MEDPUR (Polyurethane) schützen scharfkantige, hochglanzpolierte oder auch Produkte mit rauen Oberflächen bis kurz vor deren Verwendung vor Abrieb und Verunreinigung.

#### MEDPUR-Pouch

Der flache MEDPUR-Pouch wird über einen Schlitz beladen. Dank der Perforation kann eine Verpackungshälfte entfernt und das Produkt zur Verwendung vorbereitet werden. Bis kurz vor dem Einsatz schützt die zweite Hälfte des MEDPUR-Pouches das scharfkantige Produkt.

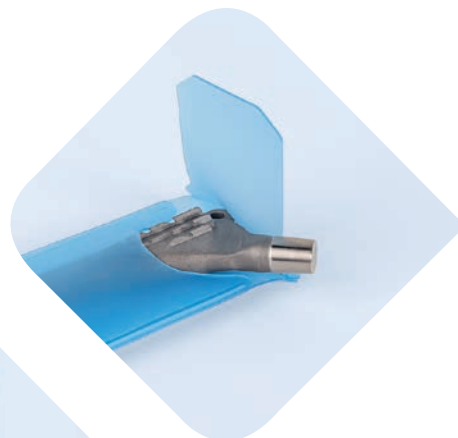

#### MEDPUR-Envelope

Der MEDPUR-Envelope bietet mit der überlappenden Lasche einen Rundumschutz.



#### MEDPUR-Tip-Protector MEDPUR-Sleeve

Der MEDPUR-Tip-Protector und der MEDPUR-Sleeve schützen die Sterilbarriere bei sehr spitzen Produkten vor dem Durchstoßen.

## MEDPUR

Verpackungen aus MEDPUR (Polyurethane) schützen scharfkantige, hochglanzpolierte oder auch Produkte mit rauen Oberflächen bis kurz vor deren Verwendung vor Abrieb und Verunreinigung.

Eine Beschädigung des Produktes oder dessen Sterilverpackung wird durch den Rundumschutz vermieden.

<b>Material:</b>	extrudierte PUR-Folie, USP Class VI geprüft
<b>Foliendicke:</b>	500 my, 1000 my
<b>Farbe:</b>	blue tinted je nach Sterilisationsart und Lagerort können Farbveränderungen auftreten
<b>Oberfläche:</b>	beidseitig matt
<b>Herstellung:</b>	unter Reinraum-Bedingungen ISO 8
<b>Sterilisation:</b>	Gamma-Sterilisation bis 50 KGray und ETO-Sterilisation
<b>Standardgrößen:</b>	Standard-Programm wird laufend erweitert, Sondergrößen auf Anfrage



### MEDPUR-Produktfamilie

Verpackungen aus der MEDPUR-Produktfamilie können teilweise mit unserem Standard-Blisterprogramm «Babuschka» kombiniert werden.

**MEDIPACK AG**  
Mühlentalstrasse 184-188  
8200 Schaffhausen  
Schweiz  
Telefon: +41 52 630 36 36

[info@medipack.ch](mailto:info@medipack.ch)

**MEDIPACK AG**  
Zweigniederlassung Deutschland  
c/o Dachser SE  
Josef-Schüttler-Str. 5  
78224 Singen  
Deutschland

[info@medipack.ch](mailto:info@medipack.ch)



Zertifiziert nach ISO 13485:2016  
Technische Änderungen vorbehalten

[www.medipack.ch](http://www.medipack.ch)