




MEDPUR-STANDARD PACKAGING FOR SHARP-EDGED AND SCRATCH-SENSITIVE PRODUCTS

- MEDPUR-Pack**
- MEDPUR-Pouch**
- MEDPUR-Envelope**
- MEDPUR-Tip-Protector**
- MEDPUR-Sleeve**


MEDIPACK AG
M E D I Z I N A L V E R P A C K U N G E N

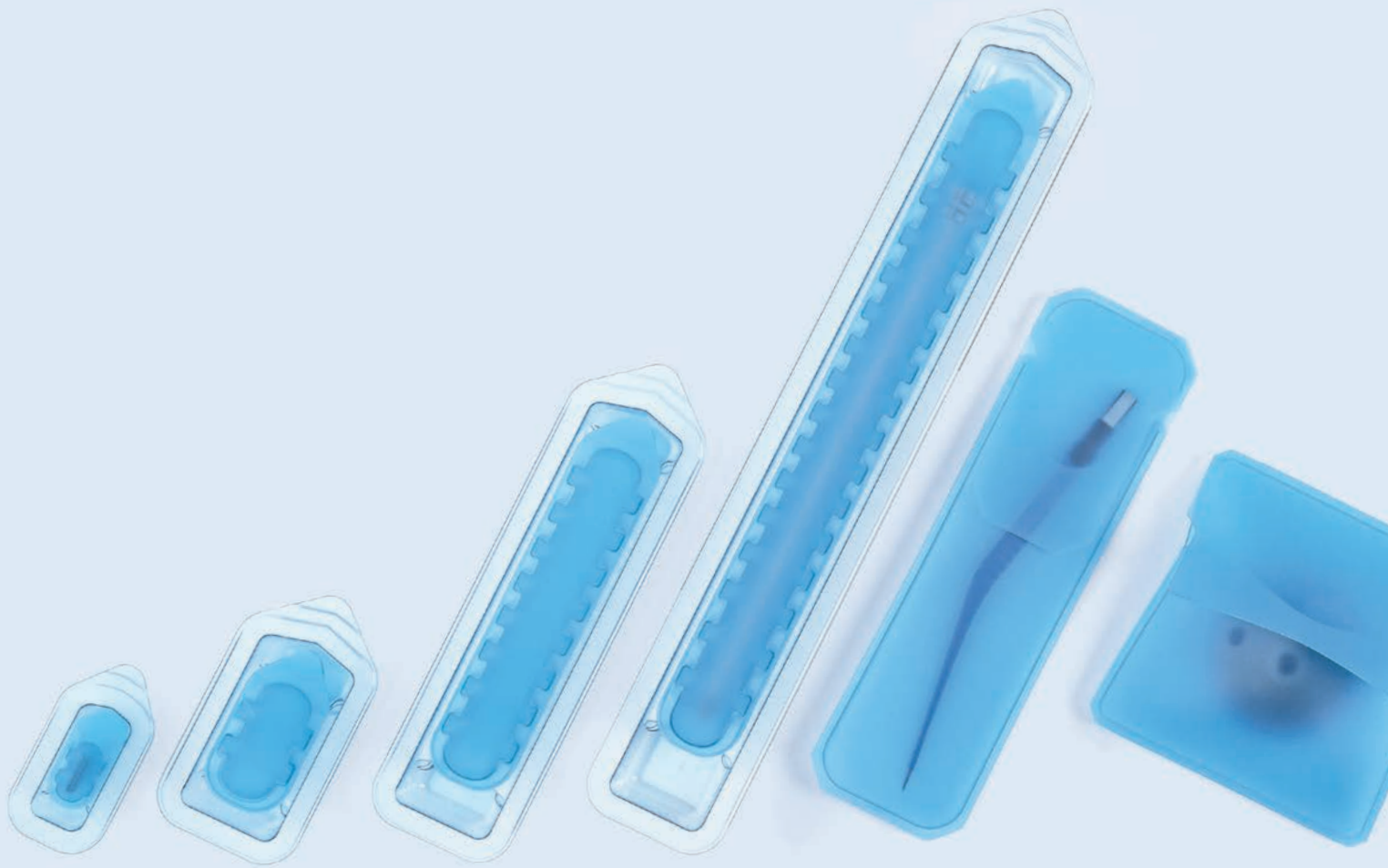

MEDPUR-PRODUCT-FAMILY

MEDPUR-Pack

The MEDPUR-Pack consists of a prefabricated thermoformed part and a fused cover made of MEDPUR, which guarantee all-round protection. Integrated ribs cushion even the heaviest products. Thanks to the pre-perforated cover, the products can be extracted without touching.






Packaging made of MEDPUR (Polyurethane) protects sharp-edged products and products with high-gloss polish or rough finish against abrasion and contamination until shortly before their use.

MEDPUR-Pouch

The flat MEDPUR-Pouch is loaded through a slit. Thanks to the perforation, half of the package can be removed and the product prepared for use. The second half of the MEDPUR-Pouch protects the sharp-edged product until shortly before use.

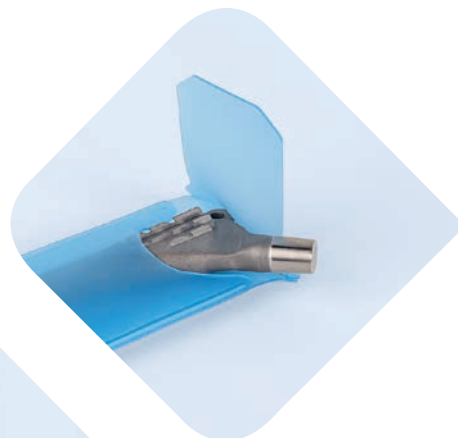

MEDPUR-Envelope

With the overlapping flap, the MEDPUR-Envelope offers all-round protection.



MEDPUR-Tip-Protector MEDPUR-Sleeve

The MEDPUR-Tip-Protector and the MEDPUR-Sleeve protect the sterile barrier against piercing by very sharp products.

MEDPUR

Packaging made of MEDPUR (Polyurethane) protects sharp-edged products and products with high-gloss polish or rough finish against abrasion and contamination until shortly before their use.

Damage to the product and its sterile packaging is prevented by the all-round protection.

Material:	extruded PUR film, USP Class VI tested
Film thickness:	500 my, 1000 my
Colour:	tinted blue colour changes can occur, depending on sterilisation type and storage location
Surface:	both sides matt
Production:	in ISO 8 clean room conditions
Sterilisation:	gamma sterilisation up to 50 KGray and ETO sterilisation
Standard sizes:	standard range is being expanded constantly, special sizes on request



MEDPUR-Product-Family

Packaging from the MEDPUR-product-family can be partially combined with our standard blister program (Babuschka).

MEDIPACK AG
Mühlentalstrasse 184-188
8200 Schaffhausen
Schweiz
Telefon: +41 52 630 36 36

info@medipack.ch

MEDIPACK AG
Zweigniederlassung Deutschland
c/o Dachser SE
Josef-Schüttler-Str. 5
78224 Singen
Deutschland

info@medipack.ch



Zertifiziert nach ISO 13485:2016
Technische Änderungen vorbehalten

www.medipack.ch